

Mondo ZEISS

CONOSCENZA E VALORI DEL BRAND



* Ricerca condotta per Carl Zeiss Vision da Interactive Market Research Novembre 2023.



Acquista su Shop on line
dal portale MyZEISS
per avere la consegna gratuita

Per informazioni:

Tel. 800 43.77.66 Numero Unico ZEISS
email: ordini@zeiss.com
Oppure il tuo Responsabile Commerciale ZEISS.

Carl Zeiss Vision Italia Spa

Via S. e P. Mazzucchelli, 17
21043 Castiglione Olona (VA)
Italia

www.zeiss.it/vision



ZEISS Vision Care

Visione precisa e costante idratazione



EASY CONTACT ASPHERIC

Scheda tecnica lenti a contatto asferiche
giornaliere e mensili

zeiss.it/ottico



Seeing beyond

EASY CONTACT ASPHERIC

Lenti a contatto asferiche giornaliere e mensili
con il miglior rapporto qualità/prezzo




Materiale Hydrogel

La gamma di lenti a contatto giornaliere con un ottimo rapporto qualità/prezzo, anche grazie alla protezione UV integrata.

La superficie della lente è modellata attraverso 8 curve, per massimizzare il comfort, garantire un movimento ottimale e migliorare l'acuità visiva favorendo la sensibilità al contrasto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

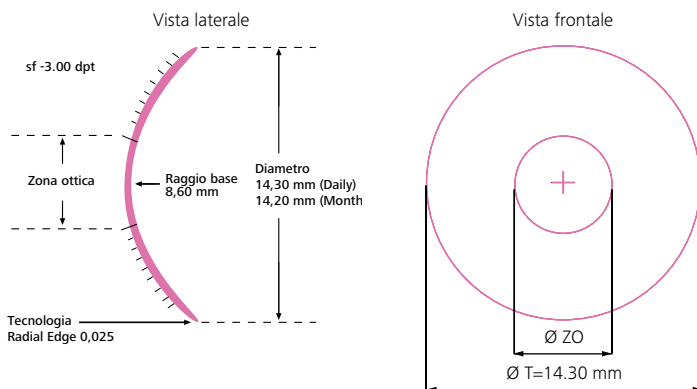

- **TECNOLOGIA RADIAL EDGE:** lo spessore della lente sulla curva periferica è stato ridotto al minimo per offrire comfort e prestazioni ottimali. Il bordo con design asferico della superficie anteriore è stato realizzato con un raggio di 0,025 mm per fornire una transizione graduale con la superficie posteriore.
- **DESIGN A 8 CURVE:** la superficie della lente è modellata attraverso 8 curve, per massimizzare il comfort e garantire un movimento ottimale sull'occhio, a vantaggio del benessere oculare.

TABELLE RIASSUNTIVE

	DAILY	MONTHLY
Materiale:	Methafilcon B	Methafilcon A
Dk:	25	23
H2O:	57%	55%
Protezione UV:	Classe I	Classe I
Raggio base:	8,6	8,6
Diametro:	14,3	14,2
Tinta di manipolazione:	Azzurro	Azzurro
Pack:	30 / 90 pezzi	1 / 3 pezzi
Spessore al centro:	0,10	0,095
Dk/t (-3,00):	27	25
Design:	Asferico 8 curve	Asferico 8 curve
Poteri sferici:	da -12,00 a -6,50 (Step 0,50) da -6,00 a +6,00 (Step 0,25)	da -20,00 a -6,50 (Step 0,50) da -6,00 a +6,00 (Step 0,25) da +6,50 a +10,00 (Step 0,50)
Codice / Classe:	SC90G / 133 (conf. 30 pz) SC90H / 193 (conf. 90 pz)	S030K / 761 (conf. 1 pz) S030P / 763 (conf. 3 pz)

CONSIGLI APPLICATIVI

1

Anamnesi

- Informarsi sulle abitudini e sulle esigenze visive.
- Età del portatore.
- Prescrizione in uso (LAC o Occhiale).
- Creare il profilo visivo del portatore utilizzando la webapp il "Mio Profilo Visivo ZEISS".



2

Refrazione

- Aggiornare la refrazione per lontano per ottenere il miglior comfort binoculare.
- Determinare il potere sferico riportando al piano corneale i poteri superiori a -4,00 D.

3

Applicazione

- Ideali per qualsiasi parametro corneale.
- Attendere dai 30 ai 60 minuti, per permettere la stabilizzazione del film lacrimale.
- Verificare centratura e movimento della lente valutando anche il comfort d'uso.
- Determinare parametri lente definitiva, considerando la sovrarefrazione.